



Oclean W1
Water Flosser
Ústní sprcha

**Uživatelský
manuál**

Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Ústní sprcha

Tryska
Trysku lze otáčet o 360 stupňů. Při výměně trysky ji vytáhněte ve svislé poloze. Trysku zasuňte do spodní části, dokud nebude těsně spojena s tělem přístroje.

Změna režimu
Krátce stiskněte a změňte režim

LED režimu
Level 1 manuál
Level 2 manuál
Level 3 automaticky (Krátkým stisknutím tlačítka zapnout spustíte automatickou dávku; režimy lze nastavit v aplikaci Oclean)

Nádrž na vodu
Nádržku na vodu lze vyjmout mírným tahem dolů.




Tlačítko zapnout/vypnout/LED nabíjení
Stisknutím tlačítka napájení převeďte zařízení do pohotovostního režimu, indikátor režimu zůstane v posledním zapamatovaném režimu. Podržením tlačítka zapnout/vypnout po dobu nepřetržitě dávky se činnost zastaví uvolněním tlačítka.
Červená LED bliká: Připomenutí nízkého stavu energie; bílá LED bliká: Stav nabíjení; bílá LED svítí nepřetržitě: Plně nabit.

Magnetický nabíjecí port
Nabíjení se spustí po magnetickém připojení nabíječky k nabíjecímu portu.


Postup



1 Naplnění nádržky na vodu
Odpojte nádržku od těla zařízení. Použijte trochu větší sílu a stáhněte nádržku na vodu dolů. Naplňte nádržku vodou nebo ústní vodou (teplota kapaliny by neměla být vyšší než 40 °C) a poté vložte nádržku zpět do zařízení.

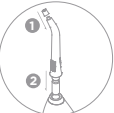

2 Instalace trysky
1. Připevněte silikonový uzávěr k trysce.
2. Nasaďte trysku na tělo zařízení.

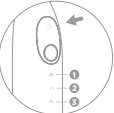

3 Změna režimu
Krátce stiskněte tlačítko změny režimů, vyberte nejvhodnější režim, zařízení si zapamatuje poslední vybraný režim.



4 Sprcha
Přiblížte trysku přerušovaně ke šterbině mezi zuby. Stisknutím a podržením tlačítka zapnout/vypnout spustíte čištění. Pomalu přejděte podél linie dásní k další zóně, čištění opakujte pro všechny šterbiny.

- Specifikace

Název	Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Model	Oclean W1
Kapacita nádržky	30 ml
Voděodolnost	IPX5
Napětí	2,5 W
Nabíjení	Magnetické konektory
Vstup	5 V~ 0,5 A
Životnost baterie*	30 dní
Kapacita baterie	1200 mAh
Doba nabíjení	3 h
Standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Poznámka: Životnost baterie je vypočtena na základě výchozího režimu, práce jednou denně, 1 nádrž/čas.

Upozornění
Zařízení lze použít pouze s přiloženou Oclean tryskou.

Výrobce/dodavatel nenese zodpovědnost za případné škody nebo poranění vzniklé použitím nevhodné trysky.

Zařízení použijte pouze k účelu jemu určenému - ústní sprcha. Vyhněte se střiknutí vody do očí, nosu nebo uší. Jinak hrozí riziko poranění.

Lidé, kteří jsou po operaci ústní dutiny nebo mají krvácí obtíže v ústní dutině je doporučeno používání konzultovat se svým ošetřujícím zubním lékařem.

Během prvních dní používání může docházet ke krátkodobémukrvácení z dásní. Je to normální stav. Dásně by si měly po určité době zvyknout. Pokud bude krvácení z dásní pokračovat (3-4 týdny od začátku používání), vyhledejte prosím svého ošetřujícího zubního lékaře a konzultujte s ním používání zařízení.

Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení mohou dále používat pouze děti starší12 let. Jinak hrozí riziko.

- Typy**
1. Během prvního provozu se může stát, že místo vody z trysky půjde pouze plyn. po pár použitích bude poté z trysky tryskat pouze voda.
2.Tělo zařízení nevystavujte vodě nebo proudu vody. K usušení použijte suchý hadřík.
3. Pokud nebudete zařízení dlouhodoě používat, prosím vylijte vodu z nádržky. Použijte na konec použití funkci vypuštění zbylé vody. Zařízení skladujte na suchém a studenějším místě. Nevystavujte zařízení přímým slunečním paprskům.
4. Během provozu je možné, že se zařízení může zahřívát. Tento stav je normální.
5. Během prvních dnů používání je možné, že pocítíte pachut' plastu. Po dlouhodobějším používání pachut' zmizí.
6. Pokud budete zařízení vozit na cesty, cždy vodu z nádržky vylejte a nádržku osušte.

Poznámka:
Výrobce doporučuje vyměňovat trysku jednou za 4-6 měsíců. P řípadě potřeby, kdy tryska je zanesená nebo nelze ji řádně nasadit, vyměňte trysku dříve.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz