

Elektrický zubní kartáček, Dida DT1056/DT1056A



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

1. Parametry

Model	DT1056	DT1056A
Vstup	5V – 1 A	
Baterie	1200 mAh	
Napětí	3,7 V	
Výkon	2 W	
Voděodolnost	IPX7	
Napájení	USB-C	indukční

2. Schéma výrobku

1 Tlačítko zapnutí/vypnutí

2 Nastavení síly

3 Indikátor nastavení síly (postupu)

4 Režim Clean

5 Režim White

6 Režim Refresh – Soft Repair


7 Indikátor baterie

8 Je doporučeno první dva týdny při zavedení čištění sonickým kartáčkem používat nejjemnější sílu čištění.

Model DT1056

9 Nabíjecí port

10 Nabíjecí kabel


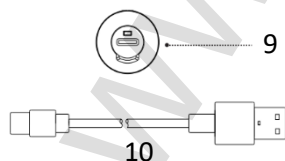


Model DT1056A

11 Spodek kartáčku

12 Nabíjecí základna

13 Nabíjecí kontakty

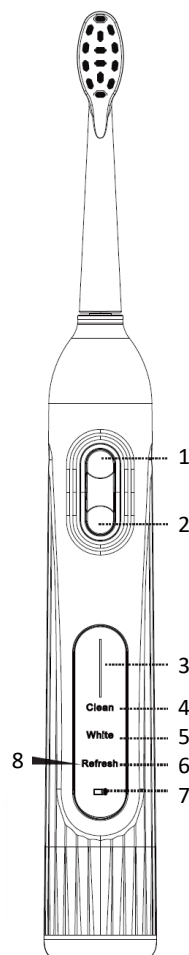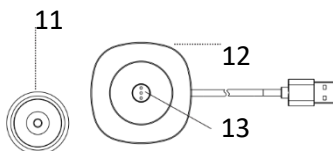

DT1056:

Lze nabíjet standardním kabelem s koncovkou USB-C připojeným k adaptéru nebo počítači.


DT1056 a DT1056A:

Před nabíjením kartáčku se ujistěte, že jsou z místa dotyku kartáčku a základny odstraněny nečistoty.

3. Použití

Nasazení hlavice kartáčku na rukojeť

Nasadte kartáčkovou hlavu na rukojeť kartáčku a ujistěte se, že mezi oběma částmi je drobná mezera. (Mezera má zajistit, aby hlava kartáčku při vysokofrekvenčních vibracích nenarážela na rukojeť elektrického zubního kartáčku, aby měl motor větší výkon).

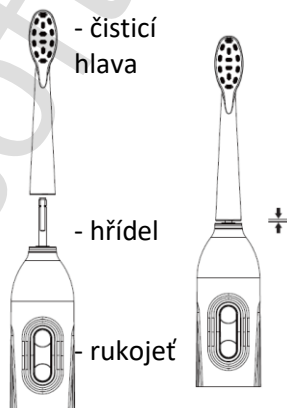

Aplikujte zubní pastu

Navlhčete štětiny a rovnoměrně vytlačte zubní pastu na hlavici kartáčku.

Obsluha kartáčku

1) Zapnutí napájení

- Kliknutím na tlačítko spuštění na produktu ho zapnete.
- Po spuštění se automaticky vybere naposledy použitý režim.
- Výrobek běží první 2 sekundy nízkou rychlostí, aby se zabránilo rozstřikování zubní pasty, a po 2 sekundách přejde na normální rychlost.
- Po spuštění zubního kartáčku je celková doba chodu zubního kartáčku 2 minuty s krátkými pauzami každých 30 sekund jako připomínka změny oblasti čištění.

2) Režim

- Stiskněte tlačítko zapnutí na 5 s po zapnutí čištění. Tento kartáček nabízí 3 režimy čištění.
- Pro výběr režimu viz schéma produktu.
- Jako výchozí je nastaven režim Refresh – Soft Repair

3) Přepínání rychlosti

- a. Když je v normálním chodu 2 sekundy po zapnutí, stiskněte tlačítko nastavení síly, abyste přepnuli sílu čištění. K dispozici je 7 úrovní a dlouhým stisknutím tlačítka nastavení síly můžete plynule měnit rychlost tam a zpět.
- b. Po přepnutí rychlosti se rozsvítí příslušný indikátor rychlosti.
- c. Jako výchozí je přednastavena 3. rychlost.

4) Vypnutí

Po stisknutí tlačítka spuštění na 5 sekund přejde do stavu vypnutí.

5) Funkce paměti síly čištění

Po stisknutí tlačítka spuštění pro zapnutí se aktivuje naposledy použitý režim a rychlost.

6) Připomenutí baterie a nabíjení


- a. Po zapnutí se rozsvítí indikátor napájení (zelená kontrolka), pokud je kapacita baterie nižší než 10 %, bude blikat kontrolka upozornění na napájení; nabijte přístroj včas
- b. Během nabíjení nelze zařízení zapnout a používat jej.
- c. Doba nabíjení je přibližně 5 hodin. Při nabíjení bude blikat kontrolka baterie (červeně) a po úplném nabití se kontrolka baterie změní na zelenou. Včas odpojte nabíjecí kabel, abyste zabránili přebíjení.
- d. Když se baterie vybita, je třeba ji nabíjet déle než 15 minut, než bude možné zařízení znovu zapnout.

Tipy:

Abyste předešli rozstříknutí zubní pasty, nejprve namočte štětiny kartáčku, naneste přiměřené množství zubní pasty, vložte kartáček do úst, až poté kartáček zapněte. Na hlavici kartáčku netlačte, kartáček by pak nefungoval správně. Pohybujte kartáčkem lehce a ve správném úhlu k rozhraní dásní a zubů.

4. Správné čištění zubů

- Umístěte hlavici kartáčku na spojení zubů a dásní pod úhlem 45 stupňů, stiskněte tlačítko pro zapnutí elektrického zubního kartáčku.

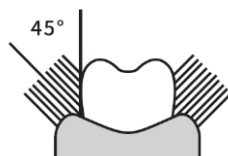

- Kartáčkovou hlavou jemně pohybujte mezi zuby tam a zpět v malých krocích a pohybujte jí nepřetržitě po celou dobu cyklu čištění zubů.
- Elektrický zubní kartáček se každých 30 sekund pozastaví, aby vám připomněl, že máte vyčistit další oblast/kvadrant ústní dutiny. Když se elektrický zubní kartáček automaticky vypne, znamená to, že bylo dosaženo doporučené doby čištění.
- Abyste zabránili rozstříknutí pěny zubní pasty, vypněte elektrický zubní kartáček, než jej vyjmete z úst.

Upozornění:

I když máte zdravé zuby a dásně, mohou vaše dásně při začátcích používání kartáčku slabě krváčet. Toho krvácení by mělo do dvou týdnů odeznít. Dásně si po této době na použití kartáčku zvyknou. Pokud problém s krvácením přetrvává, přestaňte kartáček používat a konzultujte situaci s vaším zubním lékařem.

5. Péče o hlavici kartáčku

Po čištění zubů vyčistěte hlavici kartáčku čistou teplou vodou a rukojeť otřete měkkým hadříkem. Poté uložte na suché místo.

Varování

Před každým použitím zkontrolujte, zda není zařízení zjevně poškozeno. Pokud se objeví poškození nebo je přístroj vážně poškozen pádem, nepoužívejte jej.

Těm, kteří v nedávné době podstoupili chirurgický zákrok v dutině ústní nebo na dásních nebo se podrobují léčbě, se před použitím tohoto výrobku doporučuje poradit se s odborným zubním lékařem. Při jiných příznacích v dutině ústní, jako je oslabený chrup nebo neustálé krvácení z dásní, se před použitím tohoto přípravku poraďte s profesionálním zubním lékařem. Lidé s citlivými a křehkými zuby by se měli před použitím tohoto výrobku poradit se svým zubním lékařem.

Během počátečního používání tohoto výrobku mohou někteří uživatelé pociťovat svědění, brnění nebo krvácení dásní, nemějte obavy, obvykle zmizí po dvou týdnech; pokud trvá déle, poraďte se s lékařem.

Tento výrobek je osobní čisticí prostředek. Nepoužívejte jej, prosím, ve více lidech. Nevystavujte výrobek slunečnímu záření. Snažte se jej dlouhodobě neumísťovat do vlhkého prostředí. Měl by být skladován ve větraném prostředí o teplotě 7-40 stupňů.

Vodotěsnost na úrovni IPX-7, nezahrnuje účinnou izolaci proti teplé vodě a páře, nepoužívejte jej prosím ve vaně nebo ve sprše.

Pokud po použití pocítíte jakékoli potíže nebo bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se před použitím tohoto elektrického zubního kartáčku se svým lékařem. Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let nebo osoby s mentálním postižením a neschopností obsluhy.

Pravidelně kontrolujte a čistěte nabíjecí port, abyste zabránili hromadění prachu a nečistot, které snižují izolační účinek, což vede k nežádoucím následkům, jako je přehřátí.

Vyhazujte vyřazené rukojeti a příslušenství podle místních předpisů pro recyklaci a likvidaci malých domácích spotřebičů.

Tento výrobek je určen pouze k čištění ústní dutiny. Nepoužívejte jej k jakémukoli jinému účelu. Pokud pocítíte jakékoli nepříjemné pocity nebo bolest, přestaňte tento výrobek používat a obraťte se na zubního lékaře.

Tento výrobek neupravujte ani neopravujte.

V zájmu zajištění bezpečnosti je třeba, aby osoby s oslabenými tělesnými schopnostmi, mentálními nebo smyslovými překážkami a s nedostatkem příslušných zkušeností a znalostí používaly tento výrobek pod dohledem nebo vedením jiné osoby. Nedovolte bez dozoru dětem čistit zuby a provádět údržbu výrobku. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Dávejte na děti pozor a zabraňte jim hraní si s výrobkem.

Umístěte tento výrobek do větraného a suchého prostředí, vyhněte se přímému slunečnímu záření, ohni a jiným předmětům vyzařujícím teplo.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se kardiostimulátorů nebo jiných implantovaných zařízení se před použitím přípravku poraďte se svým zubním lékařem nebo výrobcem implantovaného zařízení.

Ochrana životního prostředí:

Dobíjecí lithiová baterie uvnitř tohoto výrobku může obsahovat látky, které znečišťují životní prostředí. Než tento výrobek zlikvidujete nebo jej odevzdejte do vládou určené recyklační stanice, nezapomeňte baterii nejprve vyjmout a odeslat ji do určené recyklační stanice. Pokud baterii nemůžete vyjmout, můžete výrobek zaslat zpět do poprodejšího střediska.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz