




Model: R-A012 / R-A020

Solárna váha

Spoločnosť RENPHO sa venuje ochrane životného prostredia znížovaním spotreby papiera. Naskenujte QR kód alebo zadajte nižšie uvedenú URL adresu a zobrazte alebo

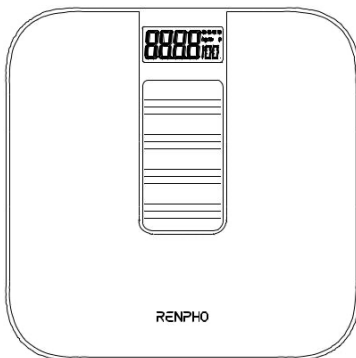

si stiahnite úplnú verziu elektronickej
používateľskej príručky:

<https://renpho.com/pages/solar-powered-smart-scale>

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Váha je určená len na domáce použitie a nie na lekárske ani komerčné účely.
2. Osoby, ktoré sú tehotné, majú osteoporózu, kardiostimulátor, umelé kĺby, prenosné EKG alebo iné kovové implantáty, by mali váhu používať iba na účely váženia a pri vstupe na váhu by mali mať obuté topánky, aby sa predišlo úniku elektrického prúdu.
3. Všetky údaje o zložení tela slúžia len na informačné účely a nemali by sa používať ako náhrada za radu od licencovaného zdravotníckeho pracovníka.
4. Toto zariadenie je váha napájaná solárnou energiou. Nabíjajte ju priamym slnečným žiarením alebo inými svetelnými zdrojmi. Nepodporuje nabíjanie cez USB.
5. Pred prvým použitím zapnite hlavný vypínač. Ak váhu dlhší čas nepoužívate, vypnite ju.
6. Ak chcete váhu aktivovať, vstúpte na ňu bez topánok.
7. Nepoužívajte váhu v prostredí s náhlymi zmenami teploty.
8. Váhu používajte na suchom, rovnom, pevnom a rovnom povrchu.
9. Nestojte na stranách váhy ani na ňu neskáčte, aby ste predišli zraneniu.
10. Nepreťažujte váhu (max. 180 kg/400 lb).
11. Váhu umiestnite/používajte na dobre osvetlenom mieste (najmenej 2^{•••} „•••“ sa zobrazí na displeji.), aby sa zabezpečilo dostatočné svetlo na dlhodobé používanie.
12. Umiestnite váhu do oblasti, kde je 4^{••••} „••••“ sa na displeji zobrazí pre rýchlejšie nabíjanie, keď je batéria takmer vybitá.
13. Zabráňte striekaniu vody na solárny panel na váhe.

14. Neponárajte váhu do vody ani nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Váhu čistite mierne navlhčenou handričkou.
15. Nepokúšajte sa váhu z akéhokoľvek dôvodu rozoberať, inak môže dôjsť k strate záruky.
16. Batériu nezohrievajte ani nerozoberajte.
17. Lítiová batéria s poškodeným obalom by nemala byť vystavená vode.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

O produkte

1. Technické špecifikácie

Názov produktu: Inteligentná váha

Model: R-A012 / R-A020

Pracovné napätie: 3,7 V

Pracovný prúd: $\leq 13,5$ mA

Kapacita vstavanej batérie: 500 mAh

Jednotka: kg/lb (Prepínanie cez aplikáciu)

Presnosť: < 50 kg: $\pm 0,3$ kg;

< 110 libier: $\pm 0,66$ libry

50 – 100 kg: $\pm 0,4$ kg;

56,7 kg – 100,1 kg: $\pm 0,88$ kg

> 100 kg: $\pm 0,5$ kg;

> 220 libier: $\pm 1,1$ libry


Delenie: 0,05 kg / 0,2 lb

Kapacita: 0,2 – 180 kg / 0,4 – 400 libier

Veľkosť produktu: 280 x 280 x 23 mm / 11 x 11 x 0,9 palca

Hmotnosť produktu: 1,3 kg / 2,9 libry

2. Displej

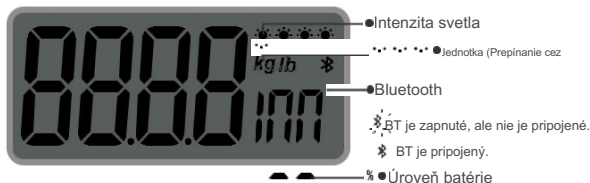

a. Aby sa zabezpečilo dostatočné svetlo na váhu pri dlhodobom používaní,

umiestnite/používajte ho na dobre osvetlenom mieste. (Najmenej 2 „●“, „
(Na displeji sa zobrazí „“) b. Pre rýchlejšie akumulovanie energie umiestnite
váhu do oblasti s priamym

slnéčné svetlo (4 „●“, „“ sa zobrazí na displeji.), keď je batéria takmer
vybitá.



3. Ikony

 Preťažený (Max. 180 kg/400 libier)	 Slabá batéria (Umiestnite váhu do slnko v pravý čas.)	 Meranie telesného tuku	 Kalibrácia
---	--	--	---

Používanie produktu

1. Pred použitím

a. Váhu umiestnite na suchý, rovný, pevný a pevný povrch. Vyhnite sa mokrej, klzkej, kobercovej alebo nerovnej podlahe.

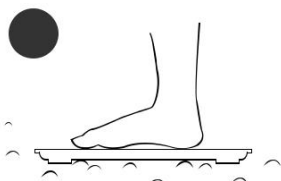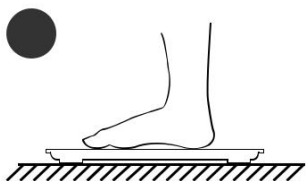

b. Zapnite hlavný vypínač na zadnej strane váhy.


c. Kalibrácia: Opatrne vstúpte na váhu a potom z nej zostúpte. Na displeji váhy sa zobrazí „CAL“ a potom „0,00“, čo znamená, že kalibrácia je dokončená.

d. Začnite merať.

2. Meranie

a. Postavte sa na váhu so suchými a bosými nohami a počkajte 3 – 5 sekúnd. b. Keď číslo zobrazené na displeji váhy dvakrát zabliká, meranie je dokončené.

* Ak je pripojenie úspešné, merania si môžete pozrieť prostredníctvom aplikácie Renpho Health.

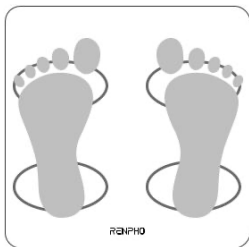

Tipy:

1. Pre zaistenie presnosti sa snažte merať v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.
2. Váha sa prepne do pohotovostného režimu, ak ju necháte 10 sekúnd nečinnú. Pre jej aktiváciu na váhu jemne postúpte.

Sprievodcovia aplikáciami

1. Stiahnite si aplikáciu Renpho Health

Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „Renpho Health“ v obchode App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.

Systémové požiadavky: iOS 12.0 alebo novší, Android 7.0 alebo novší.



Renpho Health



Poznámka: Z dôvodu neustálych aktualizácií a vylepšení sa aplikácia „Renpho Health“ môže mierne líšiť.

2. Prihlásenie/Registrácia

a. Prihláste sa priamo s existujúcim účtom aplikácie Renpho.

b. Ak nemáte účet v aplikácii Renpho, klepnite na „Registrovať sa“.

Zaregistrujte si nový účet pomocou svojej e-mailovej adresy a vyplňte informácie o svojom profile, ktoré sú potrebné len na výpočet mier.

Poznámka: Ak si neželáte zaregistrovať účet, môžete sa prihlásiť aj pomocou režimu host'a. Vaše miery sa však neuložia, ak sa prihlásite na inom zariadení.

3. Pridať zariadenie

* Pred pridaním zariadenia povoľte na smartfóne Bluetooth.

(Systém Android vyžaduje polohu.)

Metóda 1:


a. Postavte sa na váhu a zobrazí sa okno.

b. Klepnutím na tlačidlo „Párovať“ spárujete smartfón s váhou.




Metóda 2:

- Klepnite na „Pridať zariadenie“ v pravom hornom rohu stránky „Zdravie“ a pripojte sa manuálne.
- Klepnite na „Váha telesného tuku“.
- Postavte sa na váhu podľa pokynov v aplikácii, kým sa na obrazovke nezobrazí okno.
- Klepnite na „+“ pre pripojenie. (Ikona Bluetooth sa na displeji váhy po úspešnom párovaní rozsvieti natrvalo.)

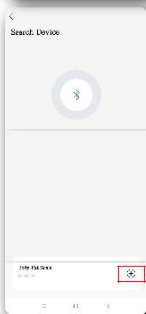

4. Prepínanie jednotiek

Ak chcete prepnúť jednotky, klepnite na „Nastavenia“ a potom na „Jednotky“ a vyberte jednotku podľa svojich potrieb.

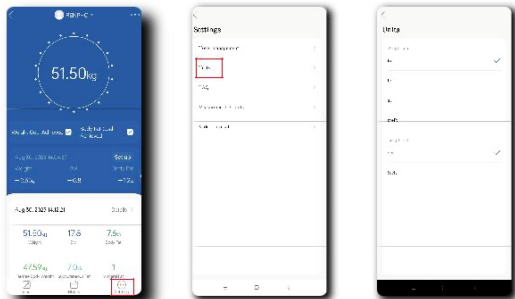

Často kladené otázky

1. Ako môžem zapnúť váhu?

Zapnite vypínač na zadnej strane váhy a vstúpte na ňu bez topánok, aby ste ju aktivovali.

2. Musím vymeniť batériu?

Nie, nemusíte. Váha je napájaná solárnou energiou a inými svetelnými zdrojmi.

3. Ako môžem nabiť váhu?

Umiestnite váhu tam, kde je viditeľné svetlo. Čím silnejšia je intenzita svetla, tým rýchlejšie je nabíjanie.

4. Ako zistím aktuálnu úroveň nabitia batérie?

Skontrolujte percento nabitia batérie na displeji váhy. 100 % znamená, že váha je plne nabitá.

5. Ako zistím aktuálnu intenzitu svetla?

Skontrolujte počet „●○○○○“ na displeji váhy. Čím viac „●○○○○“, čím ich je viac, tým silnejšia je intenzita svetla.

6. Prečo váha prestala fungovať?

Váha sa pravdepodobne vybila. Umiestnite váhu na dobre osvetlené miesto, aby sa nabíjala.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.



Tel: +34 910 254 378



E-mail: ventas@360mobile.es

*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby.

NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

Oznámenie:

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu

pre životné prostredie alebo ľudské zdravie z nekontrolovaného zneškodňovania odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálu zdroje. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca môže tento produkt odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Súlád s predpismi FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Súlád s predpismi o vystavení rádiový frekvenčným frekvenciám

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

Súlád s predpismi ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu podľa normy IC RSS-102 stanovené pre nekontrolované prostredie.

Cet équipement est conforme aux aux d'exposition aux Radiations IC CNR-102 établis pour un environnement non contrôlé.

RENPHO

Smart Health Simplified

Dovozca do Spojeného kráľovstva: EEON(UK)LIMITED

Kemp House, 160 City Road, Londýn, EC1V 2NX, Spojené kráľovstvo

Dovozca do EÚ: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland,

Nemecko Tel: +49 40 23969285 (LEN DE)

Výrobca: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. Qianhai

Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong

Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 PRChina

UK REP Richers & Vision Ltd.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Anglicko, GU35 0NF.

EUREP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum

Linnegraben 20, 65933, Frankfurt nad Mohanom,

Nemecko E-mail: info@ce-connection.de