




Elis 1C

Model: R-A033

Společnost RENPHO se zavázala k ochraně životního prostředí. Chcete-li snížit spotřebu papíru, naskenujte prosím QR kód nebo zadejte následující URL adresu a stáhněte si plnou verzi elektronické uživatelské příručky:

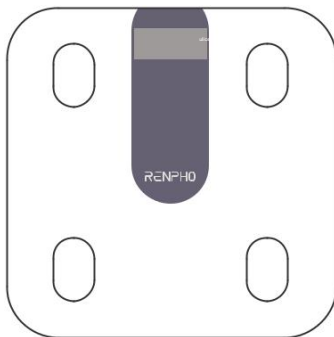

<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

Děkujeme, že jste si vybrali RENPHO Elis 1C. Tato váha vám nabízí podrobný přehled o vašich 13 zdravotních ukazatelích, které vám pomohou dosáhnout zdravějšího životního stylu. Přejeme vám příjemný zážitek a úspěch na vaší cestě za zdravím a kondicí!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Váha je určena pouze pro domácí použití a není určena pro lékařské ani komerční účely. Neměla by být používána k diagnostice onemocnění, poruch nebo abnormálního fyzického stavu.
4. Děti mladší 8 let nebo těhotné osoby, osoby s osteoporózou, kardiostimulátorem, umělými klouby, přenosným EKG nebo jinými kovovými implantáty by měly váhu používat pouze k vážení a při vstupu na váhu by měly mít obuv, aby se zabránilo úniku elektrického proudu.
5. Veškeré uvedené údaje o složení těla slouží pouze pro informaci a neměly by být používány jako náhrada za radu od kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
6. Nepřetěžujte váhu. (Maximální nosnost: 200 kg)
7. Před každým použitím váhu zkontrolujte, zda není poškozená. Nepoužívejte poškozenou váhu, abyste předešli nepřesnosti nebo zranění.
8. V případě jakékoli poruchy nejprve zkontrolujte nabití baterií. V případě potřeby baterie vyměňte.
9. Pro zajištění přesnosti používejte váhu na tvrdém, rovném a suchém povrchu.
10. Abyste předešli rušení nebo nebezpečí, nepoužívejte váhu v prostředí v blízkosti zařízení se silnými elektromagnetickými poli.
11. Abyste předešli zranění, nestůjte na okrajích váhy, neskákejte na ni ani na ni nešlapejte.

12. Váha je jemný a přesný měřicí přístroj. Zacházejte s ní opatrně, abyste se nerozbili.
13. Váha není vodotěsná. Uchovávejte ji suchou a nikdy ji neponořujte do vody. K čištění povrchu použijte vlhký hadřík nebo čistič skla. Nepoužívejte mýdlo ani chemické čisticí prostředky.

14. Nevystavujte váhu přímému slunečnímu záření ani ji nepoužívejte při vysokých teplotách nebo extrémně vlhkých prostorách. Váhu skladujte na chladném a suchém místě.
15. Nepokoušejte se váhu z žádného důvodu rozebírat, mohlo by dojít k jejímu poškození nebo ke zrušení záruky.

O baterii

1. Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
2. Vyměňte všechny baterie v sadě najednou.
3. Různé typy baterií ani nové a použité baterie se nesmí míchat.
4. Vybité baterie je třeba ze spotřebiče vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
5. Pokud bude spotřebič delší dobu skladován bez použití, měly by se baterie vyjmout.
6. Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
7. Uvědomte si riziko zkratu pólů spotřebiče napájeného z baterií nebo baterie kovovými předměty.
8. Tento spotřebič obsahuje nedobíjecí baterie, tyto baterie se nesmí dobíjet.
9. Baterie vždy vkládejte správně podle polarity (+ a -) vyznačené na baterii a stupnici.
10. Baterie nezahřívejte, nezkratujte, nevybíjejte násilím, nezapouzdřujte ani neupravujte. Baterie nedeformujte ani nedemontujte.
11. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
12. Nenabíjejte baterie.
13. Nesvařujte ani nepájejte přímo na baterie.
14. Nevhazujte baterie do ohně.
15. Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru dospělé osoby.
16. Nepoužité baterie skladujte v originálním obalu mimo dosah kovových předmětů. Pokud jsou již vybalené, nemíchejte je ani je neházejte dohromady.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

CO JE V KRABÍČCE

Elis 1C x1

AAA Baterie x3

(předinstalované) Uživatelská

příručka x1

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Váha tělesného tuku

Model: R-A033

Jednotka: lb / kg / st


Nosnost: 0,4–440 lb / 0,2–200 kg

Dělení: 0,2 lb / 0,05 kg

Rozměry: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 palec

Baterie: 3 x 1,5V AAA (součástí balení)

O VAŠEM ELIS 1C

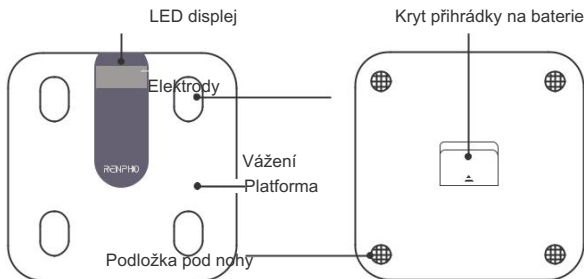

Ikony


	Kalibrace Před každým použitím váhu kalibrujte.
	Přetížený Maximální nosnost: 200 kg.
	Slabá baterie Vyměňte baterie.

	Měření tělesného tuku
	Připojení Bluetooth Probíhá připojování přes  Bluetooth.  Bluetooth je připojen.
st lb kg	Jednotky Přepnuto přes aplikaci.

* Pro úsporu energie se váha automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti.

PŘED POUŽITÍM

Odstraňte izolační pásku z předtím, než vyndáte bateriový prostor počáteční použití.

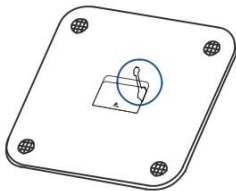

INSTALACE APLIKACE A PÁROVÁNÍ

1. Stáhněte si aplikaci Renpho Health

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „Renpho Health“ v App Storů nebo Google Play a stáhněte si aplikaci Renpho Health.



Poznámka: Vzhledem k neustálým aktualizacím a vylepšením se aplikace „Renpho Health“ může mírně lišit.

2. Spárujte váhu přes Bluetooth

Před párováním povolte na smartphonu Bluetooth.

- Zařízení iOS (verze: 12.0 nebo novější) vyžadují povolení Bluetooth.
- Zařízení Android (verze 7.0 nebo novější) navíc potřebují povolení k přístupu k poloze.

Metoda 1

- a. Otevřete aplikaci Renpho Health a stoupněte si na elektrody váhy bosýma, suchýma nohama.






- b. Klepněte na „Připojit“ pro spárování, když se v aplikaci zobrazí okno.



Metoda 2


- Otevřete aplikaci Renpho Health a stoupněte si na elektrody váhy bosýma, suchýma nohama.
- Klepněte na „+“ v pravém horním rohu stránky „Zařízení“ pro ruční připojení.
- Klepněte na ikonu váhy tělesného tuku, jakmile se zobrazí.

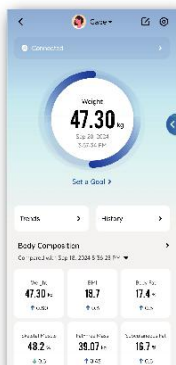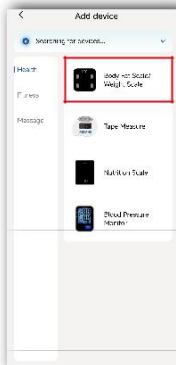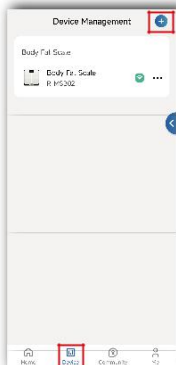

KALIBRACE VAŠEHO ELIS 1C

Před každým použitím váhu kalibrujte, abyste zajistili její přesnost.


1. Umístěte váhu na rovný, tvrdý povrch. Nepokládejte na ni koberec.
2. Pro aktivaci váhy stoupněte na ni jednou nohou a poté z ní sestupte.
3. Na displeji se zobrazí „CAL“ a poté „0.0“ nebo „0.00“, což znamená, že kalibrace je dokončena.

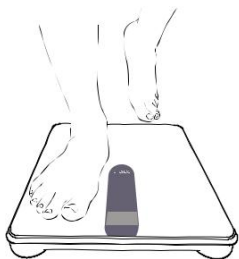

CAL → 000 kg
nebo
CAL → 000 kg



POUŽÍVÁNÍ ELIS 1C

1. Ujistěte se, že váha je umístěna na rovném, tvrdém povrchu.
2. Po kalibraci váhy stoupněte na elektrody váhy bosýma, suchýma nohama, zastavte se a počkejte, až se na displeji váhy zobrazí konečné měření.
3. Po měření váha odešle data do aplikace prostřednictvím Bluetooth. Otevřete aplikaci pro synchronizaci a zobrazení podrobných měření, sledování pokroku a přístup k dalším funkcím a informacím.

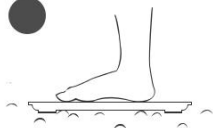

VÝMĚNA BATERIÍ

Baterie vždy vkládejte správně podle polarit (+ a -) vyznačené na baterii a stupnici.

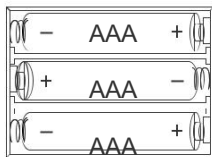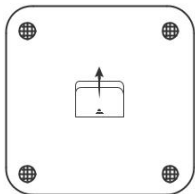

Poznámka:

- Před vložením baterie očistěte kontakty baterie a také kontakty na váze.
- Vždy vyberte správnou velikost a typ baterie, které nejlépe vyhovují zamýšlenému použití. Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých typů nebo značek.
- Vyměňte všechny baterie v sadě najednou.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

1. Váha nedokáže detekovat tělesný tuk a/nebo jiné

údaje.a. Ujistěte se, že máte nohy suché a bosé.

b. Stůjte a nehybujte se, dokud se na displeji váhy nezobrazí konečné měření.

Pokud stále nemáte přístup, zkuste si na nohy nanést hydratační krém a znovu změřit, nebo požádejte někoho jiného, aby vyzkoušel výše uvedené 2 kroky.

2. Zaregistroval(a) jsem si účet na webových stránkách RENPHO, ale nepodařilo se mi ho použít k přihlášení do aplikace Renpho Health.

Webové stránky RENPHO a aplikace Renpho Health jsou dva samostatné systémy. Vytvořte si prosím účet pro aplikaci Renpho Health.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na váš nákup produktu RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání.

Záruční podmínky naleznete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro uplatnění záruky vyžadována.

Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt tím neztratíte.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat.

Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.



Tel.:+44(0)7434-666088 (POUZE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

Pondělí–pátek 9:00–17:00 (GMT)



E-mail:support-eu@renpho.com (Spojené království a EU)

* V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NEVYHAZUJTE žádné součásti produktu, protože by mohly být potřebné k jeho kontrole/opravě.

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Soulad s předpisy ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1: Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.
- 2: Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvobozený od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux suivantes conditions:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že máte ze zákona povinnost tyto spotřebiče likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré spotřebiče musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, musí být předem vyjmuty a zlikvidovány odděleně.

2. Možnosti vrácení starých spotřebičů

Vlastníci elektroodpadu jej mohou vrátit nebo vyzvednout v rámci možností stanovených a dostupných orgány veřejné správy odpadů k zajištění jeho řádné likvidace.

3. Osobní údaje



Všem koncovým uživatelům OEEZ se připomíná, že jsou zodpovědní za smazání osobních údajů z OEEZ určeného k likvidaci.

1. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že se po skončení jejich životnosti nesmí likvidovat v domovním odpadu.
2. Ze zákona jste povinni po použití vrátit staré baterie a akumulátory. Můžete tak učinit zdarma na sběrném místě ve vaší oblasti. Adresy vhodných sběrných míst získáte od svého města nebo místního úřadu.

3. Baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Tříděný sběr a recyklace starých baterií a akumulátorů má zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



4. Prosíme, pokud možno, zabraňte vzniku odpadu ze starých baterií, např. znečišťujte veřejná prostranství tím, že nebudete nedbale ponechávat baterie ani elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie.

Společnost Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice

2014/53/EU, směrnice 2011/65/EU, nařízení o rádiových zařízeních z roku 2017, nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a další relevantní ustanovení. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximální RF výkon: 2,87 dBm

Provozní frekvence: 2402 MHz až 2480 MHz

RENPHO