


RENPHO

Smart Health Simplified

Uživatelská
příručka

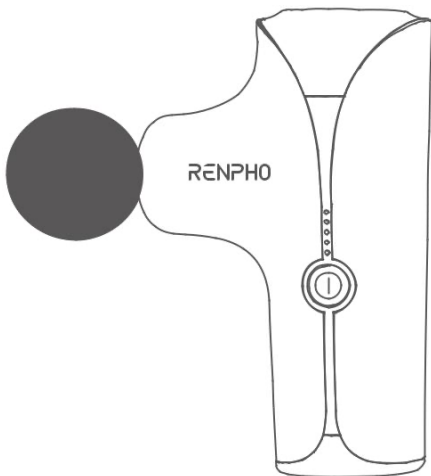

Model: RP-GM173

Mini masážní pistole

Děkujeme vám za zakoupení mini masážní pistole RENPHO. Masážní pistole nabízí silnou perkusní masáž. Při užívání uvolnění svalů a těla byste ji měli používat opatrně. Abyste zajistili bezpečnost a předešli poškození majetku, pečlivě si přečtěte tento návod a používejte jej podle pokynů. Nedodržení pokynů může způsobit vážná zranění nebo smrt a/nebo vážné škody na majetku.

Zavedení

Mini masážní pistole je zařízení pro hlubokou relaxaci svalů a fascií. Je vhodná pro fyzickou masáž po cvičení. Dokáže snížit ztuhlost a bolest svalů, zmírnit svalovou únavu a urychlit krevní oběh, čímž se dosáhne cíle zlepšit zdraví měkkých tkání těla.

Důležité bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přístroj je určen pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské účely.
2. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

NEBEZPEČÍ – Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nepokoušejte se zařízení vyndat, pokud spadne do vody.
2. Nepoužívejte při koupání ani ve sprše.
3. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama.

4. Neumísťujte ani neskladujte zařízení na místech, kde by mohlo spadnout nebo být vtaženo do vany či umyvadla. Nevkládejte jej do vody ani jiné kapaliny ani jej nenechávejte upadnout do ní.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Pokud jste uživatelem následujících produktů, poraďte se před použitím s lékařem:

- 1) Děti do 8 let
- 2) Těhotné ženy
- 3) Osoby s krevní stází
- 4) Osoby se zlomeninami
- 5) Osoby se srdečním onemocněním, kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo kovovými předměty v těle
- 6) Pokud jste v posledních 90 dnech podstoupili operaci kloubu, nepoužívejte zařízení na těle do vzdálenosti 7,5 cm od místa operace.

Pokud se necítíte dobře nebo máte jakékoli neobvyklé potíže, okamžitě přestaňte zařízení používat.

2. Nepoužívejte masážní pistoli na

- 1) Citlivá kůže, oteklé nebo zanícené oblasti, v oblastech se špatným krevním oběhem, s kožními vyrážkami nebo v oblasti nevysvětlitelné bolesti břicha
 - 2) Hlava, obličej, krční obratle, kosti těla, křečové žíly, místo nádoru, oblast krku, jakékoli možné místo zlomeniny, polohy v blízkosti kostí: pažní kost, zadní strana chodidla, hřbet ruky atd.
 - 3) Oblast genitálií (Nepoužívejte tento přístroj k sexuálním účelům. Je to silný masážní přístroj a může způsobit vážné poškození zdraví.)
 - 4) Osoby v bezvědomí nebo spící
3. Nepoužívejte pod dekou nebo polštářem. Mohlo by dojít k nadměrnému zahřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
4. Nikdy nepoužívejte přístroj na měkkém povrchu, jako je postel nebo pohovka, kde by mohly být zablokovány větrací otvory.

5. Pokud toto zařízení používají děti, invalidé a osoby se zdravotním postižením, na nich nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.

6. Používejte toto zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
7. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud nefunguje správně, bylo poškozeno nebo spadlo do vody.
8. Nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
9. Nepracujte v prostorách, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky nebo kde se podává kyslík.
10. Neuchovávejte zařízení v blízkosti magnetického pole ani v oblastech, kde by mohlo být ovlivněno magnetickým polem, mohlo by dojít k vybití baterií.
11. Nedotýkejte se prsty ani vlasy mezery mezi masážní hlavici a tělem, abyste si ji nepřiskřípli.
12. Chraňte zařízení před teplem a nepoužívejte ho v místech s relativně vysokou okolní teplotou.
13. Zařízení nepouštějte do pádu, nepoužívejte na něj nadměrnou sílu ani na něj netlačte těžkou váhu, abyste předešli jeho poruše a/nebo poškození.
14. Pokud se během používání zařízení objeví vysoká teplota nebo nepříjemný zápach, okamžitě jej přestaňte používat.
15. Nepoužívejte zařízení v těsné blízkosti dlouhých vlasů, volného oblečení nebo šperků.
16. Nevyvíjejte nadměrný tlak na masážní hlavici a nemasírujte stejnou oblast nepřetržitě po delší dobu.

O baterii

1. Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrným teplotám.
2. Uvědomte si riziko zkratu pólů zařízení napájeného z baterie nebo baterie kovovými předměty.
3. Toto zařízení obsahuje nevyměnitelné baterie. Po skončení životnosti baterie je nutné zařízení řádně zlikvidovat.
4. Baterii nerozebírejte, neotevírejte ani netrhejte.
5. Nevystavujte články ani baterie mechanickým nárazům.

6. V případě úniku z článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud ke kontaktu došlo, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku a pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v manuálu k produktu.
8. Nenechávejte baterii delší dobu nabíjet, pokud ji nepoužíváte.
9. Po delším skladování může být nutné články nebo baterie několikrát nabít a vybit, aby se dosáhlo maximálního výkonu.
10. **POZOR**- Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nenabíjejte, nerozebírejte ani nezahřívejte nad 100 °C (212 °F).

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

O masážní pistoli RENPHO Mini

1. Co je v krabici

1x mini masážní pistole RENPHO

Masážní hlavice x 4

Úložné pouzdro x 1


Kabel typu C x 1

Popruh x 1

Uživatelská příručka x 1

2. Představení produktu

Odnímatelné a
vyměnitelná masážní hlavice

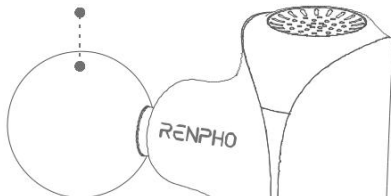


Ukazatel rychlosti

Nastavení ZAP/VYP/rychlosti
(Dlouhým stisknutím jej zapnete/vypnete)
(Krátkým stisknutím přepnete úroveň rychlosti)

Indikátor baterie

Nabíjecí port typu C

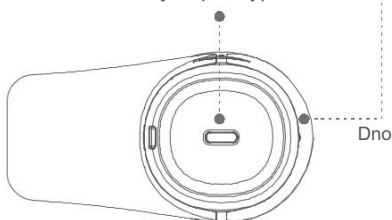



Tlumení
Hlava



ve tvaru U
Hlava



Kulová hlava



Hlava střely

3. Specifikace

Název produktu: Mini masážní pistole

Model: RP-GM173

Vstup: 5V—2A

Napětí baterie: DC 11,1 V

Kapacita baterie: 2500 mAh / 27,75 Wh

Amplituda: 8 mm

Vertikální frekvence vibrací ≤ 60 Hz

Nastavení rychlosti: 1–5 úrovní 1800–
3200 ot./min

Doba nabíjení: 3 hodiny

Provozní doba: Přibližně 4 hodiny

Časovač automatického vypnutí: 10 minut

Rozměry produktu: 139 x 87 x 49 mm
(5,5 x 3,4 x 1,9
palce)

Hmotnost produktu: 0,45 kg / 0,99 lb

Hrubá hmotnost: 0,9 kg / 1,98 lb

Použití mini masážní

1. Důležité tipy před použitím

1.1 Nabíjení

● Před použitím pistoli Massage-Age plně nabijte po dobu přibližně 3 hodin.

 **NEPři nabíjení používejte masážní pistoli!**

● Připojte výstupní konec konektoru k nabíjecímu portu stejnosměrného proudu ve spodní části masážního přístroje a poté připojte vstupní konec konektoru k mobilnímu zdroji napájení nebo nabíječce mobilního telefonu. (5V—2A, pokud použijete nabíječku s proudem menším než 2A, doba nabíjení bude delší.) ● Pokud je baterie nabitá více než 30 %, indikátor baterie svítí zeleně. Pokud je baterie nabitá méně než 20 %, indikátor bliká červeně. Pokud je baterie nabitá méně než 5 %, ihned ji nabijte, jinak se po několika sekundách červeně blikání automaticky vypne. Nedoporučuje se baterii zcela vybit na 10 %.

● Z bezpečnostních důvodů masážní pistole NEBUDE fungovat během nabíjení. Masážní pistole se navíc automaticky vypne po 10 minutách nepřetržitého používání. Pokud chcete masáž delší, zapněte ji poté.

1.2 Výdrž baterie

● Tato masážní pistole má vestavěnou dobíjecí baterii. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Celková výdrž baterie je až 4 hodiny po plném nabití.


● Výdrž baterie se může lišit v závislosti na aplikaci a/nebo provozních podmínkách. Pokud se produkt delší dobu nepoužívá,

Prosím, vypněte jej a nabijte jej jednou za měsíc, aby baterie vydržela déle.

● Uchovávejte masážní pistoli mimo dosah zdrojů tepla a nepoužívejte ji v místech s relativně vysokou okolní teplotou.

2. Návod k obsluze

2.1 Vyberte preferovanou masážní hlavici a zašroubujte ji do slotu v zařízení, dokud nebude bezpečně upevněna. Před instalací masážní hlavice se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

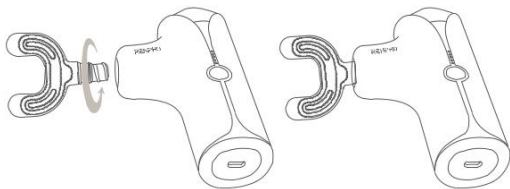

2.2 Zapněte zařízení dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Krátkým stisknutím tlačítka napájení se přepne mezi úrovněmi 1-5. Pokud tlačítko napájení dlouze stisknete po dobu 2 sekund, zařízení se okamžitě zastaví. LED indikátor indikuje odpovídající úroveň, nejnižší úroveň je 1, nejvyšší úroveň je 5.

2.3 Pro masáž odpovídajících částí těla aplikujte požadovaný tlak s přednastavenou frekvencí vibrační masáže.

* Po 10 minutách provozu se zařízení automaticky vypne.



Shoulder Massage




Back Massage



Foot Massage



Arm Massage

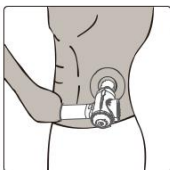

Waist Massage



Leg Massage

Péče a údržba produktu

- Pokud masážní pistoli nepoužíváte, uložte ji na bezpečné, chladné a suché místo.
- Před čištěním masážní pistoli vždy odpojte ze zásuvky.
- Po použití otřete masážní pistoli měkkým, vlhkým hadříkem s použitím neabrazivních čisticích prostředků. V případě potřeby ji vyčistěte sterilizačním prostředkem.
- Masážní pistoli NEPONOUŘUJTE do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Uchovávejte mimo dosah všech rozpouštědel a agresivních čisticích prostředků.
- NEPOKOUŠEJTE SE tuto masážní pistoli opravovat. Neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.
- Masážní pistoli NEVYHAZUJTE na skládku. Obsahuje lithium-iontovou baterii a další elektrické součástky, které jsou považovány za nebezpečný elektronický odpad.
- Nerozebírejte šroub ani se nepokoušejte rozebírat zařízení.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, měla by se baterie nabíjet jednou měsíčně.
- Masážní zařízení by mělo být skladováno v dobře větraném skladu s neagresivním plynem, 250 mm nad zemí, maximálně v 5 vrstvách naskládaných masážních přístrojů.

Podmínky prostředí

Protože elektromagnetické pole produkované masážním motorem je relativně malé, neovlivňuje elektronická zařízení a lidské tělo obecně! Pokud hlavní motor (včetně lithiových baterií) a příslušenství tohoto přístroje dosáhnou konce své životnosti, nevyhazujte je prosím bezdůvodně. Jinak elektronický odpad znečistí životní prostředí. Proved'te prosím odpovídající likvidaci v souladu s příslušnými předpisy místního úřadu ochrany životního prostředí pro nakládání s takovým elektronickým odpadem.

Teplota: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ / $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Relativní vlhkost: $\leq 90\%$

Barometrický tlak: $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Masážní pistole se nezapne.	Napájení je vypnuté.	Dlouhým stisknutím tlačítka Napájení Tlačítko pro zapnutí masážní pistole.
	Baterie je příliš slabá.	Nabijte masážní pistoli.
	Masážní pistole se vypne po 10 minut.	Dlouze stiskněte Tlačítko napájení pro zapnutí na masážní pistoli dalších 10 minut.
Masážní pistole vypne se automaticky.	Masážní pistole ochrana proti přehřátí bude vypne masážní pistoli automaticky, když je příliš horko.	Počkejte na masáž nechte zbraň vychladnout před zapnutím zpět na.
	Masážní pistole se vypíná po 10 minutách.	Dlouhým stisknutím tlačítka Napájení Tlačítko pro zapnutí masážní pistole pro dalších 10 minut.
Masážní pistole se nedaří spustit.	Masážní hlavice je zasunut příliš těsně.	Vypněte masáž trochu hlavou, poté jej zapněte.

Záruční podmínky

Na váš nákup produktu RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání.

Záruční podmínky naleznete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro záruku vyžadována.
Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt se tím nesníží.

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.

**TEL: +44(0)7434 666088 (POUZE SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ)**

.....

..

.....

(USA a

+1(844) 417 0149 Kalifornie)

.....



..

.....

(1800 69 7367) (POUZE

1800 MŮJ RENPHO AUSTRÁLIE)

.....

.

.....

+49 40 23969285 (POUZE

NĚMECKO)

.....

..

.....



E-mail: support-eu@renpho.com (UK&EU)

support@renpho.com (USA a Kalifornie)

support-au@renpho.com (Austrálie)

*V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NEVYHAZUJTE žádné součásti produktu, protože by mohly být potřebné k jeho kontrole/opravě.

Soulad s předpisy FCC

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. — Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Soulad s předpisy ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1: Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.

2: Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada platí pro aux appareils radiové výjimky z licence. Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes:

1: l'appareil ne doit pas produire de brouillage.

2: l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO

Smart Health Simplified