


RENPHO
Smart Health Simplified

**Používateľská
príručka**

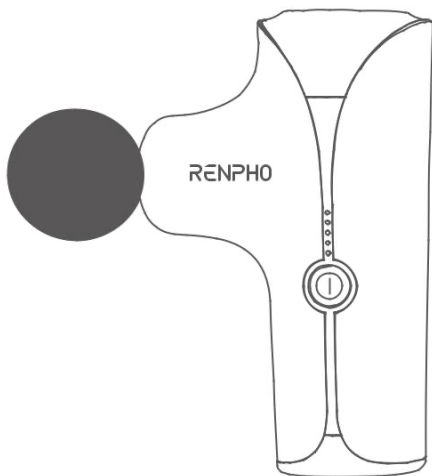

Model: RP-GM173

Mini masážna pištoľ

Ďakujeme, že ste si zakúpili mini masážnu pištoľ RENPHO. Masážna pištoľ ponúka silnú perkusnú masáž. Pri užívaní uvoľnenia svalov a tela by ste ju mali používať opatrne. Pre zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu majetku si pozorne prečítajte tento návod a používajte ho podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť a/alebo vážne poškodenie majetku.

Úvod

Mini masážna pištoľ je zariadenie na hlbokú relaxáciu svalov a fascií. Je vhodná na fyzickú masáž po cvičení. Dokáže znížiť stuhnutosť a bolesť svalov, zmierniť svalovú únavu a zrýchliť krvný obeh, čím sa dosiahne cieľ zlepšiť zdravie mäkkých tkanív tela.

Dôležité bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Pri používaní tohto zariadenia by sa mali vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

1. Zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené na lekárske účely.
2. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.

NEBEZPEČENSTVO – Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:

1. Nepokúšajte sa zariadenie vybrať, ak spadne do vody.
2. Nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
3. Nepoužívajte zariadenie s mokrymi rukami.

4. Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohlo spadnúť alebo byť vtiahnuté do vane či umývadla. Nevkladajte ho do vody ani inej kvapaliny ani ho nepúšťajte do nej.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

1. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, ak ste užívateľom nasledujúcich produktov:

- 1) Deti do 8 rokov
- 2) Tehotné ženy
- 3) Osoby so stázou krvi
- 4) Osoby so zlomeninami
- 5) Osoby so srdcovým ochorením, kardiostimulátorom, defibrilátorom alebo kovovými predmetmi v tele
- 6) Ak ste v posledných 90 dňoch podstúpili operáciu kĺbu, nepoužívajte zariadenie na tele do vzdialenosti 7,5 cm od miesta operácie.

Ak sa necítite dobre alebo máte akékoľvek nezvyčajné ťažkosti, okamžite prestaňte zariadenie používať.

2. Nepoužívajte masážnu pištoľ na

- 1) Citlivá pokožka, opuchnuté alebo zapálené miesta, v oblastiach so slabým krvným obehom, s kožnými vyrážkami alebo v oblasti nevysvetliteľnej bolesti brucha
 - 2) Hlava, tvár, krčné stavce, kosti tela, kŕčové žily, miesto nádoru, oblasť hrdla, akékoľvek možné miesto zlomeniny, polohy v blízkosti kostných oblastí: ramenná kosť, zadná strana chodidla, zadná strana ruky atď.
 - 3) Oblasť genitálií (Nepoužívajte toto zariadenie na sexuálne účely. Je to silné masážne zariadenie a môže spôsobiť vážne telesné poškodenie.)
 - 4) Osoby v bezvedomí alebo spiace
3. Nepoužívajte pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému prehriatiu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

4. Nikdy nepoužívajte zariadenie na mäkkom povrchu, ako je posteľ alebo gauč, kde by mohli byť zablokované vetracie otvory.
5. Pri používaní tohto zariadenia deťmi, invalidmi a osobami so zdravotným postihnutím, na nich alebo v ich blízkosti je potrebný prísny dohľad.

6. Toto zariadenie používajte iba na určený účel, ako je popísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
7. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak nefunguje správne, bolo poškodené alebo spadlo do vody.
8. Nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
9. Nepracujte v priestoroch, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
10. Neuchovávajte zariadenie v blízkosti magnetického poľa alebo v oblastiach, kde by mohlo byť ovplyvnené magnetickým poľom, pretože by to mohlo spôsobiť vybitie batérií.
11. Nedotýkajte sa prstami ani vlasmi medzery medzi masážnou hlavicom a telom, aby ste predišli pricviknutiu.
12. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu tepla a nepoužívajte ho na miestach s relatívne vysokou okolitou teplotou.
13. Zariadenie nepúšťajte, nepôsobte naň nadmernou silou ani naň nekladte ťažkú váhu, aby ste predišli jeho poruche a/alebo poškodeniu.
14. Ak sa počas používania zariadenia objaví vysoká teplota alebo nepríjemný zápach, okamžite ho prestaňte používať.
15. Nepoužívajte zariadenie v tesnej blízkosti dlhých vlasov, voľného oblečenia alebo šperkov.
16. Vyhnite sa nadmernému tlaku na masážnu hlavicu a nemasírujte tú istú oblasť nepretržite dlhší čas.

O batérii

1. Nevystavujte zariadenie ani batériu nadmerným teplotám.
2. Dávajte si pozor na riziko skratu pólov zariadenia napájaného z batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
3. Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľné batérie. Keď sa batéria opotrebuje, zariadenie je potrebné riadne zlikvidovať.
4. Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani netrhajte.

5. Nevystavujte články ani batérie mechanickým nárazom.

6. V prípade úniku z batérie zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak ku kontaktu došlo, postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Sekundárne články a batérie je potrebné pred použitím nabiť. Vždy používajte správnu nabíjačku a pokyny na správne nabíjanie nájdete v pokynoch výrobcu alebo v návode na obsluhu produktu.
8. Nenechávajte batériu dlhodobo nabíjať, keď sa nepoužíva.
9. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
10. **POZOR**- Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nenabíjajte, nerozoberajte ani nezahrievajte nad 100 °C (212 °F).

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

O masážnej pištoli RENPHO Mini

1. Čo je v krabici

Mini masážna pištoľ RENPHO x 1

Masážna hlavica x 4

Úložné puzdro x 1


Kábel typu C x 1

Popruh x 1

Používateľská príručka x 1

2. Predstavenie produktu

Odnímateľné a
vymeniteľná masážna hlavica

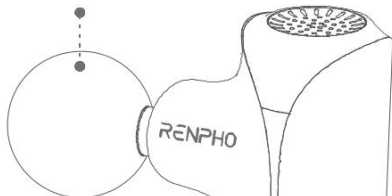


Ukazovateľ rýchlosti

Nastavenie ZAP/VYP/rýchlosti
(Dlhým stlačením ho zapnete/vypnete)
Krátke stlačenie prepne úroveň rýchlosti)

Indikátor batérie

Nabíjací port typu C

Spodná časť

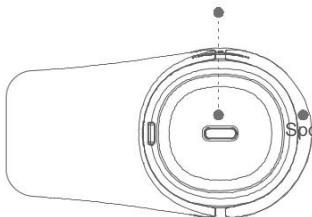



Tlmenie
Hlava



v tvare U
Hlava



Guľová hlava



Hlava guľky

3. Špecifikácia

Názov produktu: Mini masážna pištoľ

Model: RP-GM173

Vstup: 5V—2A

Napätie batérie: DC 11,1 V

Kapacita batérie: 2500 mAh / 27,75 Wh

Amplitúda: 8 mm

Vertikálna frekvencia vibrácií ≤ 60 Hz

Nastavenie rýchlosti: 1-5 úrovní 1800-

3200 ot./min Čas nabíjania: 3 hodiny

Prevádzková doba: Približne 4 hodiny

Časovač automatického vypnutia: 10 minút

Rozmery produktu: 139 x 87 x 49 mm

(5,5 x 3,4 x 1,9
palca)

Hmotnosť produktu: 0,45 kg / 0,99 libry

Hrubá hmotnosť: 0,9 kg / 1,98 libry

Používanie mini masážnej

1. Dôležité tipy pred použitím

1.1 Nabíjanie

● Pred použitím úplne nabite masážnu pištoľ približne 3 hodiny.

● Pripojte výstupný koniec konektora k portu jednosmerného nabíjania v spodnej časti masážneho prístroja a potom pripojte vstupný koniec konektora k mobilnému napájacímu zdroju alebo nabíjačke mobilného telefónu. (5V—2A, ak použijete nabíjačku s prúdom menším ako 2A, čas bude dlhší.) ● Keď je batéria nabitá viac ako 30 %, indikátor batérie svieti na zeleno; keď je batéria nabitá menej ako 20 %, indikátor bliká na červeno; keď je batéria nabitá menej ako 5 %, ihneď ju nabite, inak sa po niekoľkých sekundách blikania na červeno automaticky vypne. Neodporúča sa úplne vybiť batériu na úroveň 10 %.

● Z bezpečnostných dôvodov masážna pištoľ NEBUDE fungovať počas nabíjania. Okrem toho sa masážna pištoľ automaticky vypne po 10 minútach nepretržitého používania. Ak chcete masáž dlhšiu, zapnite ju vtedy.

1.2 Výdrž batérie

● Táto masážna pištoľ má vstavanú nabíjateľnú batériu. Úplné nabitie trvá približne 3 hodiny. Celková výdrž batérie je až približne 4 hodiny po úplnom nabití.

NEROBTE! Pri nabíjaní používajte masážnu pištoľ!




● Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od aplikácie a/alebo prevádzkových podmienok. Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva,

Prosím, nechajte ho vypnutý a nabíjajte ho raz mesačne, aby batéria vydržala dlhšie.

● Masážnu pištoľ uchovávajte mimo dosahu tepla a nepoužívajte ju na miestach s relatívne vysokou okolitou teplotou.

2. Návod na obsluhu

2.1 Vyberte si požadovanú masážnu hlavicu a zaskrutkujte ju úplne do otvoru na zariadení, kým nebude bezpečne pripevnená. Pred inštaláciou masážnej hlavice sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

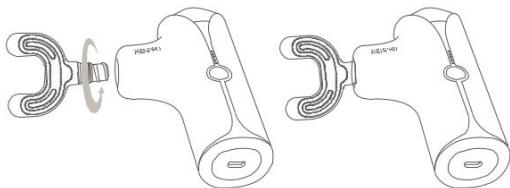

2.2 Zapnite zariadenie dlhým stlačením tlačidla napájania. Krátkym stlačením tlačidla napájania sa prepne prevodový stupeň medzi úrovňami 1 – 5. Ak tlačidlo napájania stlačíte dlho 2 sekundy, zariadenie sa okamžite zastaví. LED indikátor zobrazuje zodpovedajúcu úroveň, najnižšiu úroveň 1 a najvyššiu úroveň 5.

2.3 Na masáž príslušných častí tela aplikujte požadovaný tlak s prednastavenou frekvenciou vibračnej masáže.

* Po 10 minútach prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.



Shoulder Massage




Back Massage



Foot Massage



Arm Massage

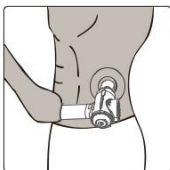

Waist Massage



Leg Massage

Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

- Keď masážnu pištoľ nepoužívate, umiestnite ju na bezpečné, chladné a suché miesto.
- Pred čistením masážnu pištoľ vždy odpojte zo siete.
- Po použití utrite masážnu pištoľ mäkkou, vlhkou handričkou s použitím neabrazívnych čistiacich prostriedkov. V prípade potreby ju vyčistíte sterilizačným prostriedkom.
- Masážnu pištoľ NEPONÁRAJTE do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Uchovávajte mimo dosahu všetkých rozpúšťadiel a agresívnych čistiacich prostriedkov.
- NEPOKÚŠAJTE SA opravovať túto masážnu pištoľ. Neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť sám.
- Masážnu pištoľ NEVYHADZUJTE na skládku. Obsahuje lítium-iónovú batériu a ďalšie elektrické komponenty, ktoré sa považujú za nebezpečný elektronický odpad.
- Nerozoberajte skrutku ani sa nepokúšajte rozoberať zariadenie.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, batéria by sa mala nabíjať raz mesačne.
- Masážne zariadenia by mali byť skladované v dobre vetranom sklade s nehrdzavejúcim plynom, 250 mm nad zemou, maximálne 5 vrstiev masážnych zariadení na sebe.

Podmienky prostredia

Pretože elektromagnetické pole vytvárané masážnym motorom je relatívne malé, neovplyvní elektronické zariadenia a ľudské telo vo všeobecnosti! Ak hlavný motor (vrátane lítiových batérií) a príslušenstvo tohto prístroja dosiahnu hranicu životnosti, nevyhadzujte ich voľne. V opačnom prípade elektronický odpad znečistí životné prostredie. Prosím, vykonajte zodpovedajúce spracovanie v súlade s príslušnými predpismi miestneho úradu ochrany životného prostredia pre spracovanie takéhoto elektronického odpadu.

Teplota: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ / $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Relatívna vlhkosť: $\leq 90\%$

Barometrický tlak: $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$

Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Masážna pištoľ nezapne sa.	Napájanie je vypnuté.	Dlho stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo na zapnutie masážna pištoľ.
	Batéria je príliš slabá.	Nabite masážnu pištoľ.
	Masážna pištoľ sa vypne po 10 minút.	Dlho stlačte Tlačidlo napájania na zapnutie na masážnej pištoli ďalších 10 minút.
Masážna pištoľ vypne sa automaticky.	Masážna pištoľ ochrana proti prehriatiu bude vypnite masážnu pištoľ automaticky, keď je príliš horúco.	Počkajte na masáž nechať zbraň vychladnúť pred zapnutím späť na.
	Masážna pištoľ sa vypne po 10 minútach.	Dlho stlačte tlačidlo napájania Tlačidlo na zapnutie masážna pištoľ na ďalších 10 minút.
Masážna pištoľ nepodarí sa spustiť.	Masážna hlavica je zasunuté príliš tesne.	Vypnite masáž trochu hlavu, potom ho zapnite.

Záručné podmienky

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná. Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt sa tým nezníži.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.

TEL: +44(0)7434 666088 (IBA SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO)

.....

..

.....

(USA a

+1(844) 417 0149 Kalifornia)

.....



..

.....

(1800 69 7367) (IBA

1800 MÔJ RENPHO AUSTRÁLIA)

.....

.

.....

+49 40 23969285 (IBA DE)

.....

..

.....



E-mail: support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)
support@renpho.com (USA a Kalifornia)
support-au@renpho.com (Austrália)

*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

Súlrad s predpismi FCC

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

—Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

—Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. — Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

—Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Súlrad s predpismi ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(prijímač) oslobodený od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1: Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

2: Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux suivantes:

1: l'appareil ne doit pas produire de brouillage.

2: l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO

Smart Health Simplified