

RENPHO

Užívateľská
príručka

Masážny prístroj na nohy



RP-FM058R



ČiernaBiela

Ďakujeme vám za zakúpenie masážneho prístroja na nohy RENPHO Foot Massager Compact. Masážny prístroj ponúka silnú masáž. Pre zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu majetku si pozorne prečítajte tento návod a používajte ho podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenia a/alebo rozsiahle škody na majetku.

DÔLEŽITÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
3. VAROVANIE – Aby ste znížili riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
 - a) Tento spotrebič by sa nikdy nemal nechávať bez dozoru, keď je zapojený. Odpojte ho zo zásuvky, keď sa nepoužíva a pred nasadením alebo odmontovaním častí.
 - b) Nepoužívajte pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému prehriatiu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
 - c) Ak tento spotrebič používajú deti, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zdravotným postihnutím, na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
 - d) Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
 - e) Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak spadol do vody.
 - f) Nenoste tento spotrebič za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.
 - g) Uchovávajte kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
 - h) Nikdy nepoužívajte spotrebič s blokovanými vetracími otvormi. Udržujte vetracie otvory bez žmolkov, vlasov a podobných nečistôt.
 - i) Nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
 - j) Nepoužívajte vonku.
 - k) Nepracujte v miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
 - l) Pre odpojenie otočte všetky ovládacie prvky do polohy vypnuté a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
4. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom, ktorý je súčasťou balenia spotrebiča.
5. Spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím zodpovedajúcim označeniu na spotrebiči.
6. Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní spotrebiča opatrné.
7. UPOZORNENIE: Používajte vyhrievané povrchy opatrne. Môže spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte na necitlivé pokožke alebo v prípade slabého krvného obehu. Bezobslužné používanie tepla deťmi alebo osobami bez zdravotného postihnutia môže byť nebezpečné.
8. UPOZORNENIE: Nestojte na spotrebiči ani v ňom. Používajte ho iba v sede.
9. Zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené na lekárske účely. Nemalo by sa používať na liečbu alebo zmiernenie chorôb alebo abnormálnych fyzických stavov.

O batérii



1. Použité batérie vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí.
 2. NEVYHADZUJTE batérie do domového odpadu ani ich nespálujte.
 3. Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
 4. Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom centre.
-
5. Pred inštaláciou batérie očistite kontakty batérie a tiež kontakty zariadenia.
 6. Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
 7. Batériu násilne nevybíjajte, nenabíjajte, nerozoberajte, nezohrievajte nad (teplotu stanovenú výrobcom) ani nespálujte. Môže to viesť k zraneniu v dôsledku odvetrávania, úniku alebo výbuchu, čo môže mať za následok chemické popáleniny.
 8. Uistite sa, že batérie sú vložené správne podľa polaritu (+ a -).
 9. Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovno-zinkové alebo nabíjateľné batérie.
 10. Zo zariadení, ktoré sa dlhší čas nepoužívali, vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi.
 11. Priehradku na batérie vždy úplne zaistíte. Ak sa priehradka na batérie nezatvorí bezpečne, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
 12. Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
 13. Vždy vyberte správnu veľkosť a typ batérie, ktoré sú najvhodnejšie pre zamýšľané použitie. Informácie dodané so zariadením, ktoré pomôžu pri správnom výbere batérie, si uschovajte pre informáciu.
 14. V prípade požitia článku alebo batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehĺtnutie lítiových gombíkových článkov alebo batérií môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a v závažných prípadoch môže spôsobiť smrť. V prípade požitia sa musia okamžite odstrániť.
 15. Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru dospeléj osoby.
 16. Nevybíjajte batérie násilím. Nedeformujte batérie. Nevhadzujte batérie do ohňa.
 17. Vybité batérie by sa mali okamžite vybrať zo zariadenia a riadne zlikvidovať. Ak sa vybité batérie dlhodobo uchovávajú v zariadení, môže dôjsť k úniku elektrolytu, čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia a/alebo zranenie osôb.
 18. Lítiová batéria s poškodeným obalom by nemala byť vystavená vode.
 19. Nepoužívané batérie skladujte v originálnom balení mimo dosahu kovových predmetov. Ak sú už rozbalené, nemiešajte ich ani ich nemiešajte.
 20. Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
 21. Dávajte si pozor na riziko skratu pólov spotrebiča napájaného z batérie alebo batérie kovovými predmetmi.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

O masážnom prístroji na nohy RENPHO Compact

1. Čo je v krabici

- 1 x Kompaktný masážny prístroj na nohy
- 1 x Diaľkové ovládanie
- 1 x adaptér

2. Špecifikácie

Názov produktu: Masážny prístroj na nohy

Model: RP-FM058R

Vstup: 12V---2,5 A

Menovitý výkon: 30 W

Časovač automatického vypnutia: 15/20/25/30 min

Vykurovacia plocha: Spodná

Materiál: ABS + Lycra tkanina

Teplota ohrevu: pod 50°C/122°F

Hmotnosť produktu: 3,4 kg / 7,5 libry

3. Prehľad produktu

Odnímateľný kryt na nohy so zipsom

Dotykový panel

Diaľkové ovládanie



Výkon


Čas (automatické vypnutie)

Intenzita vzduchu

Intenzita miesenia

Teplo

4. Funkcia

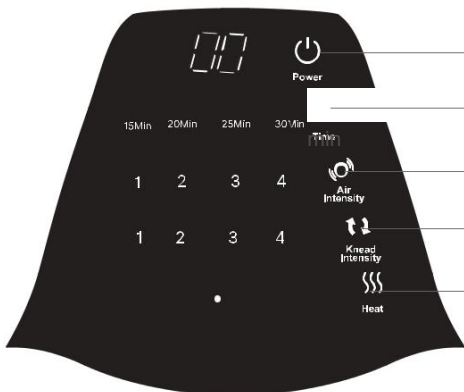

ZAP/VYP

15 min (predvolené)/20 min/25 min/30

1 (Predvolené)/2/3/4/VYP

1 (Predvolené)/2/3/4/VYP

ZAP (predvolené)/VYP

RENPHO

Odporúča sa masáž užívať maximálne 30 minút. Dlhší čas masáže môže spôsobiť miernu bolesť.

Zapojte zástrčku do zdroja napájania. Tlačidlo napájania bliká na zeleno, ozve sa pípnutie a masážny prístroj prejde do pohotovostného režimu. Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z dotykového panela.

1. Stlačením tlačidla napájania zapnete masážny prístroj (tlačidlo napájania svieti nazeleno, zatiaľ čo ostatné tlačidlá svietia nabiele). Skontrolujte predvolený čas a intenzitu vo vyššie uvedenej časti funkcií.
Opätovným stlačením prepnete do pohotovostného režimu (bliká iba tlačidlo napájania na zeleno).
2. Stlačením tlačidla času prepnete čas automatického vypnutia na 15, 20, 25 alebo 30 minút. Časovač sa vynuluje pri každom stlačení tlačidla času.
3. Stlačením tlačidla intenzity vzduchu nastavte intenzitu vzduchu v hodnotách 1/2/3/4/VYP.
4. Stlačením tlačidla intenzity miesenia upravte intenzitu miesenia na 1/2/3/4/VYP.
5. Stlačením tlačidla vykurovania zapnete/vypnete funkciu vykurovania.

Poznámka:

1. Funkcia tlaku vzduchu a miesenia môžu fungovať nezávisle. Funkcia ohrevu môže fungovať iba vtedy, keď je zapnutá funkcia tlaku vzduchu alebo miesenia.
2. Každé stlačenie je sprevádzané pípnutím a príslušným indikátorom (keď je nesvieti, LED dióda zhasne).
3. Ak nefunguje žiadna z funkcií ohrevu, tlaku vzduchu a miesenia a čas a Kontrolky tlačidla napájania svietia a masážny prístroj prejde do pohotovostného režimu, ak do 10 sekúnd nevykonáte žiadnu ďalšiu operáciu.
4. Masážny prístroj je naprogramovaný s pamäťovou funkciou. Po opätovnom zapnutí tlačidla napájania bude fungovať podľa naposledy nastaveného vzoru. Funkcia pamäte nebude fungovať, ak je pred vypnutím masážneho prístroja zapnutá iba funkcia časovača alebo ak odpojíte napájanie.
5. Masážny prístroj je vhodný pre mužov veľkosti US 12 (pánov EÚ 46).
6. Odnímateľný kryt na nohy: rozopnite ho, aby ste ho mohli zložiť a vyčistiť.



Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

1. Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť. Na utretie môžete použiť mäkkú bavlnenú handričku navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom.
2. Použitie napätia, ktoré nie je menovité (DC 12V, 2,5A), je zakázané.
3. Neprofesionálnym pracovníkom je zakázané opravovať spotrebič alebo vymieňať jeho diely.
4. Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie alebo kvalifikovaný personál schválený výrobcom, aby sa predišlo potenciálnym nebezpečenstvám.
5. Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí alebo pri vysokých teplotách.
6. Na manipuláciu so spotrebičom nepoužívajte ostré predmety, aby ste predišli jeho poškodeniu.

Spríevodca riešením problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Masážny prístroj nefunguje.	1. Odpojené napájanie alebo uvoľnená zástrčka spôsobujúca slabý kontakt. 2. Tlačidlo napájania je vypnuté alebo časovač bolo resetované. 3. Motor auto vypne sa z dôvodu zariadenie je tiež zapnuté dlhá aktivácia ochrana proti prehriatiu.	1. Znovu zapojte do zdroja napájania. 2. Zapnite tlačidlo napájania. 3. Použite masážny prístroj po motore prirodzene sa ochladzuje.
Masáž intenzita je príliš vysoká alebo príliš nízka.	1. Vaša noha je umiestnené na nesprávny uhol. 2. Nevybral som si úroveň intenzity, ktorá je to pravé pre vás.	1. Upravte kontaktný uhol, aby ste dosiahli strednú intenzitu. 2. Masážny prístroj má 4 úrovne intenzity, vyberte si intenzitu, ktorú preferujete. My na začiatok odporúčam nízku intenzitu. Alebo si individuálne zvolte tlak vzduchu alebo funkcia miesenia na zníženie intenzity.
Žiadne kúrenie, resp. nedostatočný kúrenie.	1. Funkcia ohrevu je vypnuté. 2. Produkt štruktúra a fungovanie princíp obmedzuje, ako rýchlo dno sa môže zahriať hore. Preto môže sa zdať zahrievanie trochu pomalé, 7-10 minúty predtým, ako to bude možné cítiť zjavné teplo.	1. Zapnite tlačidlo ohrevu. 2. Úplné nabitie trvá približne 7 – 10 minút zahriať. Prosím, buďte trpezliví, pretože ide o zabráňte príliš rýchlemu nárastu teploty.
Dotykový panel nefunguje správne.	1. Plastová fólia na dotykový panel nie je odstránená.	1. Pred použitím odstráňte plastovú fóliu. 2. Pred dotykom si osušte prsty tlačidlo.

2. Prsty sú mokré. 3. Nedostatočná dotyková plocha.	3. Palcom stláčajte tlačidlá získať lepšiu citlivosť na dotyk.
--	---

Záručné podmienky

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná. Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt sa tým neznižuje.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.



TEL: +1(844) 417 0149 (USA a Kalifornia)

Pondelok - piatok 9:00 - 16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (IBA AUSTRÁLIA)

Pondelok – piatok 9:00 – 18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (IBA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO)

Pondelok – piatok 9:00 – 17:00 (GMT)



E-mail: support@renpho.com (USA a Kalifornia)

support-au@renpho.com (Austrália)

support-eu@renpho.com (Spojené kráľovstvo a EÚ)

*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach



Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče musia byť likvidované oddelene od domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia byť vopred vybraté a zlikvidované oddelene.

2. Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Vlastníci elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci možnosti stanovených a dostupných verejnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na zabezpečenie jeho riadnej likvidácie.



1. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na batériách alebo akumulátoroch označuje, že sa nesmú likvidovať v domovom odpade.
2. Zo zákona ste povinný/á vrátiť staré batérie a akumulátory po použití. Môžete tak urobiť bezplatne v maloobchodnej predajni alebo na inom zbernom mieste vo vašej oblasti. Adresy vhodných zberných miest získate od vášho mesta alebo miestneho úradu.
3. Batérie môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Separovaný zber a recyklácia starých batérií a akumulátorov má zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Prosím, pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku odpadu zo starých batérií, napr. Zabráňte znečisťovaniu verejných priestranstiev tým, že nebudete neopatrne nechávať batérie alebo elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce batérie.



Spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, smernicou 2014/35/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ, predpismi o bezpečnosti elektrických zariadení z roku 2016, predpismi o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016, predpismi o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšími príslušnými ustanoveniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO